

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“美麗華實驗室”多汗症治療系統及其配件	申請醫療器材商	理工科技顧問股份有限公司
--------	---------------------	---------	--------------

“美麗華實驗室”多汗症治療系統及其配件 “miraDry, Inc.” miraDry System and Accessories

衛部醫器輸字第 025955 號

製造日期：

製造批號：

製造業者名稱： miraDry, Inc.

製造業者地址： 721 Charcot Ave, San Jose, CA USA 95131

醫療器材商名稱： 理工科技顧問股份有限公司

醫療器材商地址： 依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載（市售品須刊載實際地址）

113 11.25

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文說明書。
但如市售醫療器材同時放置中、外文說明書者，
外文說明書內容須與核定之中文說明書內容相符。



※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。

※ 中文說明書包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。

※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“美麗華實驗室” 多汗症治療系統 及其配件	申請醫療器材商	理工科技顧問股份有限公司
--------	--------------------------	---------	--------------



MD console

REF MD4000-MC

UDI



Rx Only

SN 17H1234-XX



2024-07-10

(01) 0 08 53419 00600 8 (11) 240710 (21) 17H1234-XX



CE
0050

90 %
15 %

+60 °C
-29 °C

101 kPa
kPa

EC **REP**

Psephos Limited
ATU iHub Galway
Dublin Road
Galway
H91 DCH9
Ireland
Tel: +353 91 428070
Email:
Info@psephos.com
www.psephos.com




miraDry B.V.
Herikerbergweg 88
1101 CM
Amsterdam
Netherlands



+1 855-647-2379



miraDry, Inc. 721 Charcot Avenue, San Jose, CA 95131 USA
+1 855-647-2379 www.miraDry.com
Patents Pending

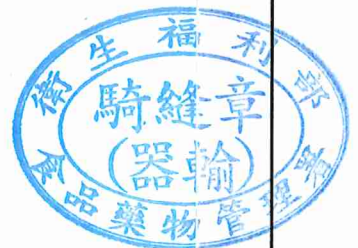

113. 11. 25

LB0399 Rev D

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“美麗華實驗室” 多汗症治療系統 及其配件	申請醫療器材商	理工科技顧問股份有限公司
--------	--------------------------	---------	--------------



MD handpiece

REF MD4000-HP

SN 17H1234-XX

 2024-07-10

UDI



(01) 00853419006015
(11) 160000
(21) 17H1234-XX

Rx Only



CE
0050

90 %
15 %

+60 °C
-29 °C

101 kPa
55 kPa

EC REP Psephos Limited
ATU iHub Galway
Dublin Road
Galway
H91 DCH9
Ireland
Tel: +353 91 428070
Email: Info@psephos.com
www.psephos.com

 miraDry B.V.
Herikerbergweg 88
1101 CM
Amsterdam
Netherlands

 +1 855-647-2379



miraDry, Inc. 721 Charcot Avenue, San Jose, CA 95131 USA
+1 855-647-2379 www.miraDry.com
Patents Pending

LB0391 Rev D

113. 11. 25

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“美麗華實驗室” 多汗症治療系統及其配件	申請醫療器材商	理工科技顧問股份有限公司
--------	----------------------	---------	--------------

<p> MD bioTip</p> <p>REF MD4500-BT UDI LOT 23H1234 2023-09 2023-09-09 W</p> <p>Rx Only</p> <p>CE 0050 EC REP Psephos Limited ATU iHub Galway Dublin Road Galway H91 DCH9 Ireland Tel: +353 91 428070 Email: info@psephos.com www.psephos.com</p> <p>miraDry B.V. Herikerbergweg 88 1101 CM Amsterdam Netherlands</p> <p>miraDry, Inc. 721 Charcot Ave, San Jose, CA 95131 USA +1 855-647-2379 www.miraDry.com</p> <p>LB00434 Rev B</p>	<p> MD armrest</p> <p>REF MD4000-AR UDI LOT 23h1234 YYYY-MM-DD (01)00663419006121 (10)23h1234</p> <p>Rx Only</p> <p>CE EC REP OBELIS S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium</p> <p>MedEnvoy Global B.V. Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123 2595 AM The Hague The Netherlands</p> <p>miraDry, Inc. 721 Charcot Ave, San Jose, CA 95131 USA +1 855-647-2379 www.miraDry.com</p> <p>LB0392 Rev D</p>
<p> Foot Switch</p> <p>REF MD4000-FS UDI LOT 24H0499 2023-09 (01)00663419006146 (10)24H0499</p> <p>Rx Only</p> <p>CE EC REP Psephos Limited ATU iHub Galway Dublin Road Galway H91 DCH9 Ireland Tel: +353 91 428070 Email: info@psephos.com www.psephos.com</p> <p>miraDry B.V. Herikerbergweg 88 1101 CM Amsterdam Netherlands</p> <p>miraDry, Inc. 721 Charcot Ave, San Jose, CA 95131 USA +1 855-647-2379 www.miraDry.com</p> <p>LB00427 Rev A</p>	<p> MD primer kit</p> <p>REF MD4000-PK UDI LOT 23H1234 2023-09 (01)00663419006114 (10)23H1234</p> <p>Rx Only</p> <p>CE EC REP Psephos Limited ATU iHub Galway Dublin Road Galway H91 DCH9 Ireland Tel: +353 91 428070 Email: info@psephos.com www.psephos.com</p> <p>miraDry B.V. Herikerbergweg 88 1101 CM Amsterdam Netherlands</p> <p>miraDry, Inc. 721 Charcot Avenue, San Jose, CA 95131 USA +1 855-647-2379 www.miraDry.com</p> <p>LB00432 Rev C</p>

※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。

※ 中文說明書包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。

※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“美麗華實驗室” 多汗症治療系統 及其配件	申請醫療器材商	理工科技顧問股份有限公司
--------	--------------------------	---------	--------------

11. 25

11. 25

113. 11. 25

113. 11. 25

113. 11. 25

- ※ 裝
- ※ 中
- ※ 預期可預見之
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“美麗華實驗室” 多汗症治療系統 及其配件	申請醫療器材商	理工科技顧問股份有限公司
--------	--------------------------	---------	--------------



miraDry
MD ice packs

REF MD4000-IP

12 miraDry ice packs

CE

NON STERILE

UDI

EC REP

OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels,
Belgium



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

113. 11. 25

 miraDry, Inc. 721 Charcot Ave, San Jose, CA, 95131 USA
+1 855-647-2379 www.miraDry.com

Made in Canada

LB0365 Rev E

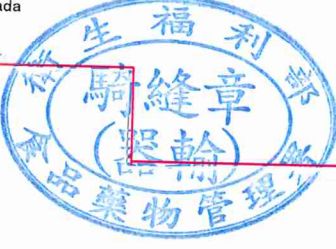

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“美麗華實驗室” 多汗症治療系統 及其配件	申請醫療器材商	理工科技顧問股份有限公司
--------	--------------------------	---------	--------------

 miraDry
template pack

 miraDry
template pack

 miraDry
MD template pack

REF MD4000-TS2
UDI

CE

Rx Only

EC REP
ORELIS S.A.
800 General Mathot, 53
1030 Brussels,
Belgium

MedEnvy Global B.V.
Ponies Margrietkruisweg 33
- Suite 123
2095 AB The Hague
The Netherlands

LB0073 Rev D

miraDry, Inc. 721 Charcot Ave, San Jose, CA, 95131 US
+1 855-647-2379 www.miraDry.com

miraDry
template pack

 miraDry
template pack

 miraDry
template pack

- ※ 裝訂中文說明書
- ※ 中文說明書包括
預期可預見之副
- ※ 標籤、說明書或
核。

113. 11. 25

告、注意事項、使用限制或
醫療器材商名稱、地址。
貼時可將照相影本代替黏貼報

主 福
騎縫
(器輸)
藥物

13. 11. 2



醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“美麗華實驗室” 多汗症治療系統 及其配件	申請醫療器材商	理工科技顧問股份有限公司
--------	--------------------------	---------	--------------



REF MD4000-TS2

UDI



Rx Only

EC REP
OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels,
Belgium



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands


LB0373 Rev D



miraDry, Inc. 721 Charcot Ave, San Jose, CA, 95131 US
+1 855-647-2379 www.miraDry.com



25

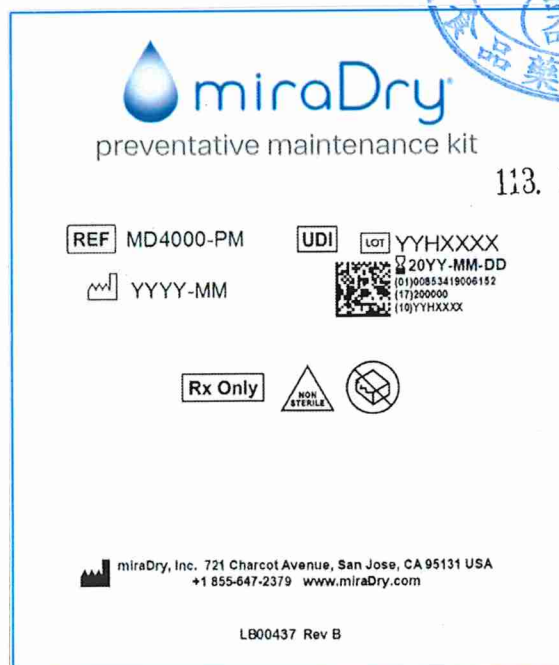

113. 11. 25

※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。

※ 中文說明書包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。

※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

“美麗華實驗室”多汗症治療系統及其配件

“miraDry, Inc.” miraDry System and Accessories

衛部醫器輸字第 025955 號


使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品敘述

miraDry 系統對腋下淺層軟組織傳遞精確的局部微波能量。該系統旨在供專業醫事人員在醫療環境中使用。當系統傳遞微波能量時，將透過主動接觸冷卻系統來保護組織表面。

miraDry System 主要由以下幾個部分所組成：

- MD4000-MC miraDry 控制台（主機及觸控式螢幕）
- MD4000-HP miraDry 手機
- MD4500-BT miraDry bioTip

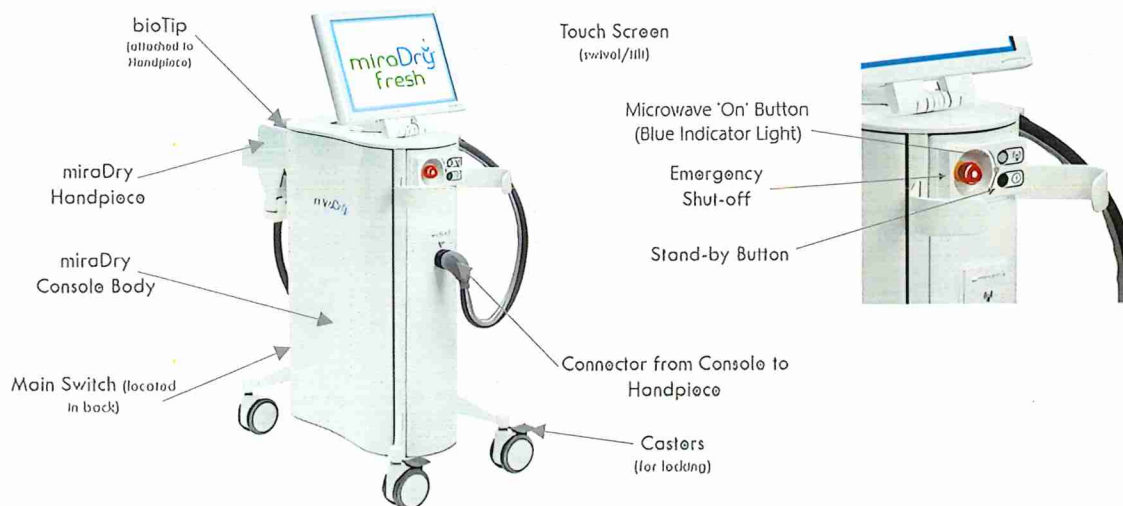

可搭配 miraDry System 一同使用的配件包括以下：

- Template Pack
- Simplified TU 4x2 Template
- Simplified Sizing Template
- Armrest
- Ice Pack
- Primer Kit
- Preventative Maintenance Kit

產品用途及適應症

- 治療原發性腋窩多汗症。
- 永久性除腋毛、減少所有顏色的腋毛（適用於 Fitzpatrick skin types I~IV型皮膚）
永久性除毛在此定義為：在完成治療方案後 6、9 和 12 個月時進行追蹤，顯示重新生長的毛髮數量長期且穩定減少。
- 可能會減少腋下異味。

禁忌症

miraDry System 不適用於以下族群：

- 配戴心臟節律器或其他植入式電子設備者
- 需要補充氧氣者
- 已知對局部麻醉劑（包括利多卡因和腎上腺素）具備抵抗力或者不耐受之病史者

潛在風險和併發症

使用本系統可能伴隨一些可能的風險。患者應密切監測相關症狀，以利早期介入。

以下是治療區域內或附近最常觀察到的副作用。大多數的副作用可能在治療後持續數日至數週。有些情況也可能持續從 1 到數個月或更長的時間。

- 治療部位腫脹／緊繃
- 觸碰腋下部位時感覺不適、壓痛或疼痛，一般可服用非處方藥，如布洛芬 (ibuprofen) 來治療
- 發紅
- 麻醉劑注射部位瘀傷
- 治療區域下方出現腫塊（可能持續數月）
- 治療區域或上臂部份發生暫時性的感覺變化或刺痛（可能持續數月）

其他較少發生的副作用：

- 相鄰的手臂或軀幹發生腫脹（可能持續數天）
- 治療區域發生色素沉澱（皮膚變黑）
- 因手術過程中手臂的姿勢而導致肩膀或手臂痠痛
- 因麻醉而導致手臂麻木或刺痛（通常持續不超過 24 小時）
- 麻醉劑中的腎上腺素引發顫抖（通常持續不超過 24 小時）
- 腋下部位緊繃（逐步改善）

有一些罕見的情況如：

- 治療區域出現小水泡／潰瘍、皮膚刺激或紅疹
- 前臂或手指發生暫時性的感覺變化或刺痛（可能持續數月）
- 治療區域及其周圍、前臂或手指發生感覺變化、刺痛、無力或疼痛（可能會持續很長時間）
- 需要服用處方藥的腋下疼痛
- 感染／膿腫或潰瘍、囊腫和慢性囊腫
- 燙傷（可能是一度、二度或三度燙傷）
- 壞死

警告及注意事項

- 請在原廠使用手冊和其所引述的其他產品文件中所述的特定技術範圍內使用 miraDry 系統。
- miraDry 系統需要由原廠代表進行初始組裝和安裝。
- miraDry 系統的使用者必須接受原廠代表或合格臨床人員的訓練。
- 若設備在運輸或組裝過程中損壞，請勿使用 miraDry 系統。
- 請勿在下列條件之外的環境操作 miraDry 系統：
 - 溫度：15°C 至 26.7°C；
 - 相對濕度：26.7°C 時 10%~60%（非冷凝），15°C 時 20%~60%（非冷凝）；
 - 海拔高度為 0~2000 公尺，或壓力為 760 至 571 mm-Hg。



1.25

- 請勿使用非原廠提供的組件、零件和配件。
- 只能將 miraDry 手機、bioTip 與 miraDry 控制台一起使用。
- 請勿在有易燃麻醉劑、可燃性氣體、靠近易燃液體（如皮膚護理劑和酞劑）、易燃物品或／和氧化劑的環境中使用本設備。始終遵守適當的防火措施。
- 請勿在富有氧氣、一氧化二氮 (N₂O)、或有其他氧化劑的環境中使用本設備。
- 請務必將交流電源線連接至正確接地的交流電源插座。
- 請勿使用延長線和／或轉接器插頭。將設備插入 100~240VAC, 50/60 Hz 的電源插座。
- 務必正確插入設備並驗證保險絲是否完好。
- 在沒有原廠代表協助的情況下，請勿嘗試自行更換控制台保險絲。
- 請勿使用已修復的保險絲或短路的保險絲座更換 miraDry 控制台的保險絲。僅使用額定電流為 T8A/250 V~ 的標準延時熔斷器。
- miraDry 系統只可搭配原廠提供的去離子水（或同等產品）。請勿裝過滿。
- 運送 miraDry 控制台時，請勿讓其內部有水。必須清除所有水以避免損壞。
- 請勿阻塞 miraDry 控制台底部的進氣口和後方的排氣孔，以確保系統冷卻功能正常運作。
- 請勿遮蔽 miraDry 控制台上的啟動指示燈或揚聲器。啟動音和燈光是重要的安全功能。
- 移動系統時，請務必透過皮套一側的把手推動。請勿向側邊推。
- 請勿嘗試修理或改動任何 miraDry 系統組件。打開任何組件的蓋子可能會導致觸電或熱燒傷。
- 請勿以銳角彎曲電纜或將其緊緊盤繞。
- 若使用者或病患身上潮濕、或接觸積液，請勿操作 miraDry 系統。可能會發生觸電。避免水或皮膚接觸電活性組件。
- 請務必將 miraDry 系統放置在使用者可以在緊急情況下使用緊急按鈕和／或電源線的位置。
- miraDry 系統應與其他電子設備之間保持盡可能遠的距離。使用任何電外科設備都會對其他電氣醫療設備造成電磁干擾 (EMI)。應採取預防措施，確保在發生此類干擾時維持患者的健康。可能需要緩解採取措施，例如重新調整 MD4000-MC 控制台的方向或位置、或屏蔽該位置。
- 當 miraDry 控制台開啟時，請勿連接或中斷 miraDry 手機。在連接或斷開 miraDry 手機之前，請先關閉 miraDry 控制台。
- 切勿讓液體進入控制台連接器。
- 請勿將清潔劑或任何其他液體噴灑或倒在控制台組件上。
- 請勿浸泡任何電線、電纜或連接器，因為這會影響電氣性能。
- 清潔前，請務必將交流電主電源開關轉至「關閉」位置，以關閉電氣設備，並從交流電源上拔下電源線。
- 治療前，操作者應評估患者的腋窩，以確定治療在技術上是否可行。難以治療的患者的例子包括超重的患者、具有大範圍皮膚皺褶的患者（這將使得放置模板變得困難）以及患有大範圍的皮膚疾病（例如濕疹或牛皮癬）的患者。
- 請勿使用 miraDry 系統來治療與其他身體部位相關的多汗症或全身性多汗症。miraDry 系統僅設計用於治療腋窩多汗症。
- 請勿使用 miraDry 系統對配戴金屬首飾或穿著含有金屬材質（例如金屬扣環、夾子或線）的衣服的人傳送微波能量。除非獲得專門的醫療建議，否則不應治療腋窩附近有金屬植入物的患者。應將助聽器從身上取下。
- 植入心臟節律器、電極或電子設備的患者不應接受微波治療，也不得進入 miraDry 系統運作的區域。
- miraDry 系統尚未在 Fitzpatrick VI 型皮膚（非常黑的皮膚）患者上進行測試。
- miraDry 系統尚未在孕婦身上進行測試。
- miraDry 系統尚未在免疫功能不全或有傷口癒合困難之病史的患者身上進行測試。
- miraDry 系統尚未在做過腋窩手術的病人身上進行測試。例子包括廣泛性淋巴廓清手術的患者、透過腋窩切口的植入乳房植入物的患者、或先前接受過多汗症或囊腫切除手術的患者。此類手術可能會改變 miraDry 系統與腋窩汗腺相互作用的方式，因此不鼓勵進行。

- 腋窩皮下脂肪很少或沒有皮下脂肪的患者發生神經相關損傷的風險較高，因為臂神經叢的一個或多個分支很可能靠近目標區域。
- 進行麻醉時要小心，避免在靠近臂神經叢的地方進行麻醉。
- 除非在給藥前對皮膚進行消毒，否則請勿進行麻醉。
- 始終遵循麻醉標籤的說明。miraDry Template Pack 之建議僅供參考，如果建議的內容與藥品標籤不一致，則不得採用 Template Pack 之建議。
- 注射適當種類和劑量的麻醉劑。確保為每個建議的注射部位注射適當的劑量。請勿將麻醉劑注入真皮層。
- 麻醉後務必等待至少 10 分鐘才能開始治療。若麻醉後已過 60 分鐘以上，切勿開始治療。
- 除非已在觸控螢幕 GUI 上測量並選擇了正確的腋窩尺寸（除非您在 Touch-up Mode 下操作），否則請勿使用 miraDry 系統。
- 請勿使用推薦潤滑劑（KY jelly 或 KY liquid）以外的潤滑劑。使用其他物質（例如超音波凝膠或 IPL 雷射耦合凝膠）會降低表面冷卻的效果，導致水泡或燒傷。
- 除非在腋窩治療區域塗抹適量的皮膚潤滑劑，否則請勿使用 miraDry 系統。
- 始終使用盡可能低的功率／能量來達到所需的效果。
- 僅治療腋窩的毛髮區域。
- 請勿將 miraDry 手機朝向眼睛或睪丸。治療期間，患者的頭部應始終背對手機。
- 除非 miraDry 手機直接接觸目標組織，否則請勿開始使用 miraDry 手機進行治療。
- 請勿對手機施加過多的壓力，因為這可能會對組織造成機械性損傷，導致瘀傷、刺痛感或短暫麻木。
- 請勿意外按下 miraDry 手機上的手動開關，以免意外釋放微波能量。
- 在特定目標部位的治療週期完成之前，請勿將手機從患者皮膚移開，否則皮膚將無法完全冷卻，並且更容易受到皮膚損傷。
- 請勿在單一次療程中對同一皮膚部位進行兩次治療。對同一部位的短時間內多次反覆進行治療，可能會導致皮膚燒傷、嚴重水腫以及皮下結構的嚴重損傷。
- 若高溫或皮膚接觸錯誤持續存在，請勿繼續使用 miraDry 系統。
- 手術後務必將用紗布包裹的冰塊放在病人接受治療的皮膚上。

治療參數

有五個預設的微波能量等級。等級決定微波能量施加到特定目標位置的時間長度（以秒為單位）。系統預設微波能量等級為 1 等級（2.40 秒）。

微波能量等級	微波能量傳遞時間
1	2.40
2	2.55
3	2.70
4	2.85
5	3.00

福
奇縫
器輸
物管

11.25

產品規格

尺寸	1.19m(H) × 0.52m(W) × 0.81m(D) 46.75" (H) × 20.25" (W) × 31.75" (D)	
重量	50.8 kg (112 lbs)	
輸入電壓	100~240VAC, 50/60Hz, 1056 VA	
保護等級	保護性接地, Class I, Type BF	
微波輸出頻率	5800MHz ± 75 MHz	
微波輸出能量	可調整至原廠定義的 5 個設定值。功率在所有設定值均保持不變。 每個設定值啟動所需期間可以 5% 增加的方式進行調整。	
最大輸出電力	負載 50Ω 時為 100W	
真空狀態	-508~-559 mm-Hg (-20~22 英吋汞柱)	
冷卻液溫度	15°C ± 1°C	
病患絕緣等級	Class BF (Body Floating) for applied parts	
週率	連續	
運作環境	溫度	15°C 至 26.7°C (60°F 至 80°F)
	相對濕度	26.7°C 時 10%~60% (非冷凝), 15°C 時 20%-60% (非冷凝)
	海拔高度	0~2000 公尺 (0~6562 英呎), 或壓力為 760 至 571mm-Hg (29.9 至 22.5 英吋汞柱)。
儲存運輸環境	溫度	-29°C 至 60°C (-20°F 至 140°F)
	相對濕度	15%~90% (非冷凝)
	海拔高度	0~4657 公尺 (0~14000 英呎), 或壓力為 760~413mm-Hg (29.9 至 16.3 英吋汞柱)。



產品配件

主要部件

部件名稱	Part Number
miraDry 控制台 miraDry Console	MD4000-MC
miraDry 軟體 miraDry Software	PN2446
miraDry 手機 miraDry Handpiece	MD4000-HP
miraDry bioTip	MD4500-BT
miraDry 交流電源供應線 miraDry AC Power Supply Cord	As applicable for country of sale
miraDry Template Pack	MD4000-TS2
miraDry Armrest	MD4000-AR

下列配件用以搭配 miraDry 系統使用：

部件名稱	Part Number
miraDry Template Pack:	MD4000-TS2
- miraDry 50 width Transfer (refill)	- MD4000-TS2-50
- miraDry 60 width Transfer (refill)	- MD4000-TS2-60
- miraDry 70 width Transfer (refill)	- MD4000-TS2-70
- miraDry 80 width Transfer (refill)	- MD4000-TS2-80
- miraDry Touch-Up Template	- MD4000-TS2-TU
- miraDry Sizing Tool	- MD4000-TS2-SIZING
miraDry Armrest	MD4000-AR
miraDry Ice Pack(s)	MD4000-IP
miraDry Primer Kit	MD4000-PK
miraDry Preventative Maintenance	MD4000-PM

製造業者名稱： miraDry, Inc.
製造業者地址： 721 Charcot Ave, San Jose, CA USA 95131
醫療器材商名稱： 理工科技顧問股份有限公司
醫療器材商地址： 依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載（市售品須刊載實際地址）

產品外觀



miraDry Console (MD4000-MC)



miraDry bioTip (MD4500-BT)




miraDry Handpiece (MD4000-HP)


配件外觀




miraDry Template Pack (MD4000-TS2)

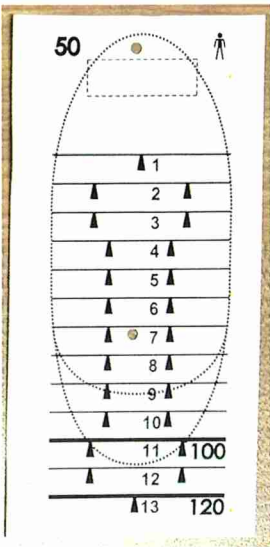


MD4000-TS2-50

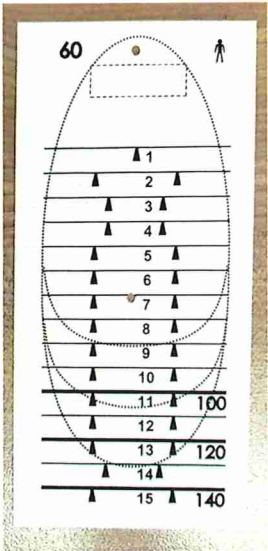


MD4000-TS2-60

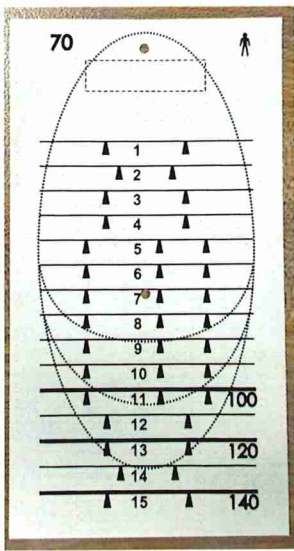


MD4000-TS2-70

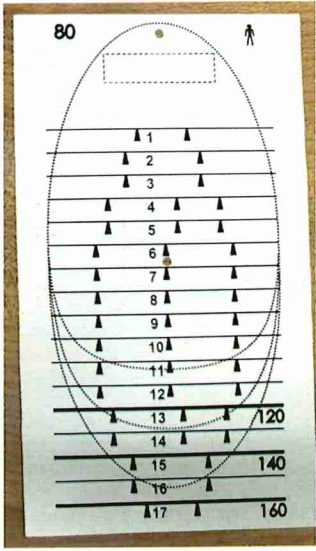

MD4000-TS2-80

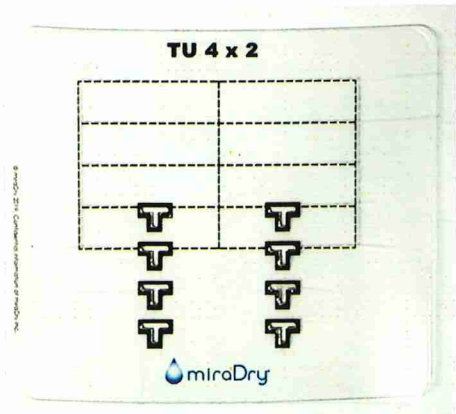

MD4000-TS2-TU

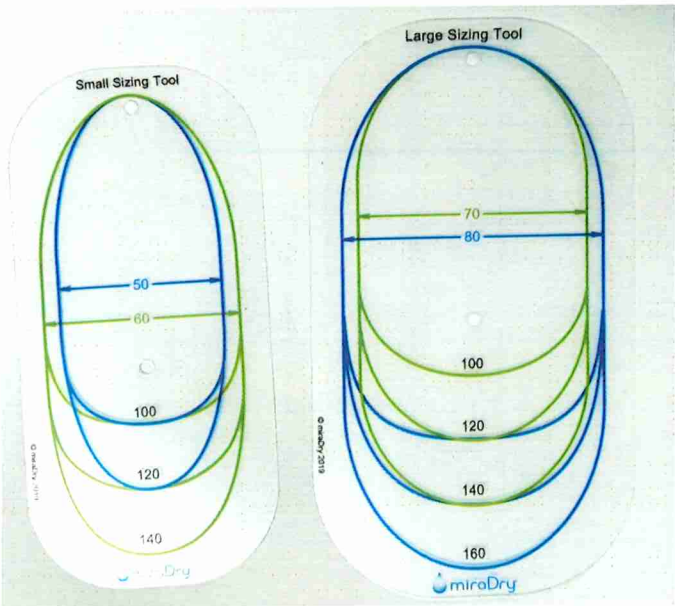

MD4000-TS2-SIZING

福永
縫章
運輸
物管



miraDry Armrest (MD4000-AR)



miraDry Ice Pack (MD4000-IP)



miraDry Primer Kit (MD4000-PK)



miraDry Preventative Maintenance
(MD4000-PM)

