

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“維納斯觀點”維拉除皺系統	申請醫療器材商	科舉顧問股份有限公司
--------	---------------	---------	------------



111. 11. -4

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文說明書。
但如市售醫療器材同時放置中、外文說明書者，
外文說明書內容須與核定之中文說明書內容相符。

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核，

“維納斯觀點” 維拉除皺系統

“Venus Concept” Venus VIVA

衛部醫器輸字第 029368 號

使用前請務必詳閱原廠使用說明書並遵照指示使用

型號：Venus VIVA

產品敘述

本產品為非侵入式設備，必須由醫師操作。利用RF射頻技術提供皮膚科及一般外科治療

本產品提供三種用於臉部的治療握把。

- Diamondpolar applicator (detachable accessory)
- Viva applicator (detachable accessory)
- Viva MD applicator (detachable accessory)

產品用途

- 當使用Diamondpolar握把時，可用於非侵入性的皺紋及細紋處理，適用於Fitzpatrick skin type I-IV的女性。
- 當使用Viva/Viva MD握把時，可用於皮膚剝離、磨皮。

系統組成



主機

主機包含外部及內部的系統組件。

觸控螢幕

觸控螢幕用於使用者與本產品之間的通訊。

螢幕上的使用者介面能隨時顯示系統的狀態以及治療的參數。

藉由觸控螢幕，使用者可以控制並進行操作。

開關

開關用於開啟/關閉本產品。


握把支架

握把支架分別位於主機的兩邊。

握把支架用於在不使用時放置相對應的握把。

握把接口


握把接口位於主機的背面如下圖。

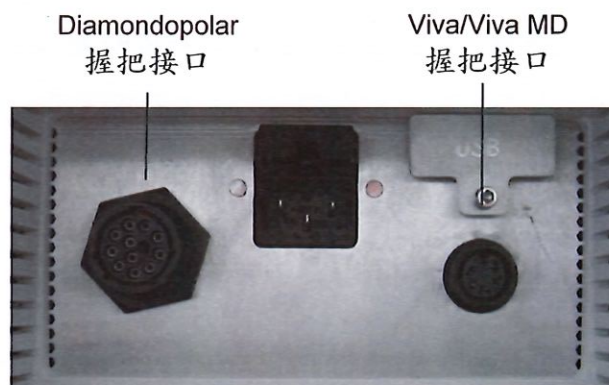

握把接口是將握把連接到系統的插座。

電源接口

電源接口位於主機的背面如下圖。

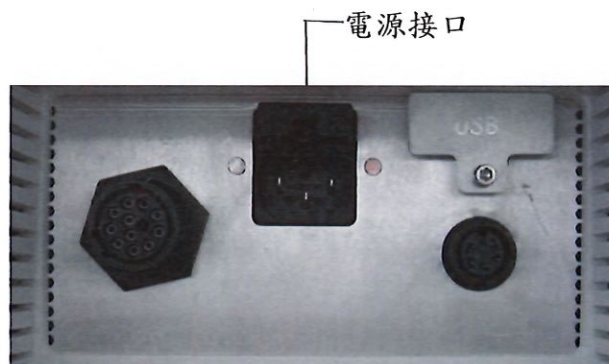

電源接口是電源線的插座，將系統連接至主電源。

警告及注意事項

⚠ 警告

1. 未依原廠使用手冊調整、操作用本產品可能會造成危險。
2. 操作或維護本產品的人員必須要熟讀原廠使用手冊，在使用或操作本產品前必須要完全理解相關的安全需求及操作程序。
3. 本產品需要受到保護以避免未經授權的使用。請確保只有經過授權的人員能取得本產品的登入碼。
4. 本產品內有高壓電。請勿嘗試打開外殼。
5. 在使用本產品時，請保持警覺，並依照原廠使用手冊採取預防措施。
6. 本產品僅能由原廠授權人員提供相關服務。

7. 若本產品失效，可能會導致輸出電力意外的增加。
8. 錯誤的使用無線電波(RF)裝置可能會導致受傷。
9. 所有的操作者必須要熟悉系統操作，並且知道如何關閉本產品以免有問題發生。
10. 請勿觸碰本產品內部零件。相關服務及維修僅能由有資格的人員操作。違反此規定有可能會導致受傷並使保固失效。
11. 在進行服務前請先將本產品的主要電源斷開(將插頭從電源插座拔下)。
12. 如果本產品的外觀不完整，請勿使用。
13. 請勿竄改控制裝置或嘗試打開本產品。
14. 請勿濫用、坐、倚靠在本產品上。
15. 請避免讓兒童靠近本產品。
16. 在採取治療前請完成對患者的病歷調查，以確保沒有併發症的發生。請務必確認患者沒有任何不應使用本產品的條件。
17. 本產品不應與其它設備接觸。
18. 對於有植入心臟節律器或者是其它電子植入物的患者，有可能會對於節律器的作用產生干擾，或者是造成節律器損壞。當有任何疑慮時，應取得專家的建議。
19. 本產品可能會對無線電波造成干擾，並且可能干擾到周遭的儀器。必要時可能會需要採取緩和的措施，例如轉向或重新定位。
20. 攜帶式或移動式的無線電波設備可能會對本產品產生影響。
21. 請務必告知患者治療程序以及預期的結果，並且在治療前以簽署的形式告知。
22. 在療程中只能有經過授權的人員能站在本產品旁邊。
23. 若患者的病情發生預期外的改變時請立即停止治療。
24. 請勿使握把掉落。如果握把掉落，請立即將系統關閉。請勿使用破損的握把，並請立即聯繫當地的支援服務。
25. 本產品並不包含任何使用者能自行更換的零件。只有經過原廠授權的人員才能進行此操作，尤其是在產品的內部。
26. 請勿讓握把接觸堅硬的物質，此舉可能會造成探頭損壞。
27. Viva/Viva MD的握把探頭僅供單次使用。

電性與機械安全

1. 所有面板和蓋子皆須保持關閉，移開蓋子會造成安全上的隱患。
2. 在進行維護時請確保本產品已關機並拔除電源。任何的維護程序皆必須由經過授權的人員進行。
3. 移動本產品時必須謹慎小心，本產品重約 8kg，如移動時須小心保護，否則可能會造成機台損壞。
4. 本產品通過電源線接地，以保護系統安全運行。

火災安全

在存有易燃物質、溶液或氣體，或者是充滿氧氣的環境中，本產品有失火的風險。有些材質，例如深色的衣料或棉絨，在富含氧氣時，可能會被正常使用下產生的高溫點燃。

1. 不要在環境中有易燃或易爆物質的地方使用本產品。

2. 在準備治療時，請勿使用易燃物質。
3. 如果在清潔及消毒本產品時使用殺菌劑，在使用前必須確保溶劑已經完全乾燥。

無線電波治療安全預防措施

警告

- 如果使用不當，本產品中使用的無線電波可能會造成傷害。
- Viva/Viva MD 握把探頭為一次性使用，使用前必須進行消毒。
 1. 請勿讓握把接觸到金屬物質，有可能會使(MP)²電極受損。
 2. 患者不得接觸到接地或者是對地有明顯電容的金屬部件(例如手術台支架等)。建議使用抗靜電的保護鞘。
 3. 請將握把的纜線擺放到不會接觸到患者或者是其它纜線的位置。
 4. 高頻手術設備產生的干擾可能會嚴重地影響到其它電子設備的操作。
 5. 請確保握把的本體乾淨。請特別注意握把的無線電波電極。請檢查各組件的完整。
 6. 請為每位患者個別更換Viva/Viva MD 握把探頭。
 7. Viva/Viva MD 握把探頭在第一次使用前請先進行清潔。在進行每一次的療程前請先確保握把探頭的乾淨。
 8. 在系統開始啟動時請確保雙手遠離握把。

在第一次治療前

- ⚠ 患者須填寫 Health Declaration 報告
- ⚠ 如為一項或多項正面答案，將不允許接受治療

禁忌症

有以下情形的患者禁止使用本產品：

- 植入式的去顫器、心臟節律器或其它植入式的電子產品。
- 在治療的區域有植入除了牙科植體以外的金屬裝置。

需要排除條件

Diamondpolar握把

警告

- 請勿將本產品用於眼皮或嘴唇
- 請依據醫師的判斷來避免任何會對患者造成不安全的情形
 1. 在治療的區域有任何發炎及/或感染的情形
 2. 現在或是過去曾有癌症或癌前狀況 (例如Actinic Keratozis (日光角化症))
 3. Degenerative neurologic diseases (退化性神經疾病)
 4. 患者有會受到熱刺激疾病的歷史，例如在治療區域有經常性的皰疹(此類患者僅可在有進行預防性療法的狀態下進行治療)
 5. 甲狀腺有未經治療的疾病
 6. 在治療區域有靜脈曲張
 7. Pregnancy or IVF procedure (懷孕或體外人工授精過程)
 8. 皮膚相關的自身免疫性疾病

9. 矽膠植入物和治療區域內有任何近期注射劑

Viva/Viva MD握把

警告

- 請勿將本產品用於眼皮或嘴唇
- 1. 現在或是過去曾有任何種類的痣發展成癌症或癌前狀況
- 2. 嚴重併發症，例如心臟疾病
- 3. 懷孕或者是在哺乳中
- 4. 免疫抑制疾病導致免疫系統不足，例如AIDS或HIV，又或者使用免疫抑制藥物
- 5. 患者有會受到熱刺激疾病的歷史，例如在治療區域有經常性的皰疹(此類患者僅可在有進行預防性療法的狀態下進行治療)
- 6. 控制不佳的內分泌疾病，例如糖尿病
- 7. 在治療區域有任何例如瘡、乾癬、濕疹及紅疹等症狀。
- 8. 有皮膚病的病史，例如蟹足腫、傷口癒合異常，又或者是極度乾燥或脆弱的皮膚
- 9. 有凝血異常的病史，或者是使用抗凝血藥物
- 10. 在六個月內有進行臉部拉提或者是眼瞼手術(眼周的手術)
- 11. 在一至三個月內有進行臉部磨皮、或是深層的化學脫皮，或皮膚狀態尚未復原或尚未穩定
- 12. 在一至三個月內在治療區域有使用神經毒素、軟組織填充(膠原蛋白)或脂肪注射，或者是其它使用生物材料注射的增大術，或是皮膚狀態尚未復原或穩定
- 13. 在治療前六個月內使用異維A酸 (Accutane)。
- 14. 在每次治療前及後的一周內使用非類固醇消炎止痛藥(NSAIDS,例如含 ibuprofen藥物)
- 15. 在六個月內於治療區域有進行手術或者是尚未完全從手術中復原
- 16. 在治療區域有刺青或者是永久性的化妝
- 17. 在過去兩周內有因陽光、日曬床或助曬霜而過度曬黑的皮膚
- 18. 其它任何醫師認為不適合進行治療的狀況

警告：如果對於潛在的副作用有任何的不確定，請患者諮詢醫師並取得書面同意書。

需要進行預防的條件 (Diamondpolar握把)

1. 在治療區域有神經毒素注射/軟組織填充(在最後一次注射的一個月後，並且狀況穩定後才能進行治療)
2. 在一個月內有進行雷射磨皮或者是深層的化學脫皮(適用於臉部治療)
3. 在治療區域有微血管擴張症
4. 酒渣鼻(不建議進行臉部治療，但在其它身體部位不受限制)
5. 在六個月內有持續使用異維A酸，例如Roaccutane
6. 在治療區域近期內有進行手術、新的疤痕、傷口或者是皮膚的損傷
7. 在甲狀腺上方的區域進行治療(不建議在此區域進行治療)
8. 哺乳

預期的臨床效應與可能的副作用

有些副作用或反應可能會在治療途中或者是治療後立即發生。雖然這些反應的發生在預期內，而且是暫時的，任何副作用的發生皆須要告知醫師。

副作用可能會在治療中或治療後發生。

預期內的臨床效應及副作用可能包括：

Diamondpolar 握把

1. 在治療中及治療後可能會有輕微的不適
 2. 在治療中及治療後可能會有溫熱感
 3. 可能會發生暫時性的皮膚發紅(紅斑)及/或腫脹(水腫)
 4. 治療區域的紅斑可能會在治療後持續兩小時
- 注意：不正確的使用本產品可能會導致副作用(瘀點或紫斑)

Viva/Viva MD 握把

1. 治療期間或治療後的不適或疼痛（癒合期間可能會出現瘙癢）
2. 皮膚過度發紅(紅斑)及/或腫脹(水腫)
3. 內生毛髮
4. 自然皮膚質地的受損(燒傷、水泡、痂皮或膿疱)
5. 色素沉著變化(色素過度沉著或色素減退)
6. 疤痕
7. 對於治療區域毛囊的潛在熱傷害(例如男性的鬍子[如果患者不希望有發生毛髮減少的可能，在治療臉部時，請避免鬍子或其它毛髮生長的區域])

注意：不正確的使用本產品可能會導致副作用

不良反應 (Diamondpolar 握把)

如果操作者沒有依照指示操作有可能會導致燒傷，例如將握把停於同一位置過久、在治療部位沒有使用足夠的Glide(保濕或潤滑劑)或者是使用錯誤的參數。如果有產生燒傷，需要立即進行治療。

治療前的資訊

Diamondpolar 握把

建議的配件

在治療前，請確保有下列配件：

- Venus Concept Ltd. Glide，作為皮膚保濕及潤滑用
- 相機及腳架（用於紀錄患者的治療進度）

臨床資料的管理

1. 為了理解患者的預期，以及尋求治療的原因，來確保能達到滿意的效果。
2. 為患者建立詳細的病例，包括先前治療的方法。包含並不限於確保患者沒有任何不適用於治療情形的問卷。
3. 檢查知情同意書，確保有告知患者治療程序以及可能的副作用。

4. 如果要進行一系列的治療，需要拍攝治療前的照片。
5. 與患者一同建立治療進度表。

紀錄

建議在治療前及療程結束後對治療部位進行拍照，來記錄治療的效果。請保持攝影條件的一致性。

為了確保拍攝條件一致，請確保快門及閃光的設定，以及拍攝的距離一致。

所有關於治療的資訊(治療區域、設定、治療持續時間及最後治療的溫度)皆須紀錄於患者的表格中。

治療前的準備

1. 確保清潔治療的區域沒有乳液、乳霜及化妝品。
2. 請確保患者放鬆、舒適地躺在治療床上，並使治療部位曝露。
3. 依照流程標記治療部位。
4. 將Venus Concept Ltd. Glide完全塗抹於治療區域。並確認沒有過敏反應的發生。

警告

塗抹不足量的Glide™可能會導致偶和不佳並導致治療效果不佳或者是影響安全。

Viva/Viva MD 握把

1. 為了理解患者的預期，以及尋求治療的原因，來確保能達到滿意的效果。
2. 為患者建立詳細的病例，包括先前治療的方法。包含並不限於確保患者沒有任何不適用於治療情形的問卷。
3. 檢查知情同意書，確保有告知患者治療程序以及可能的副作用。
4. 如果要進行一系列的治療，需要拍攝治療前的照片。
5. 告知患者須要避免皮膚刺激或者是曬黑。建議白天時在戶外需要塗抹防曬乳。
6. 除非必要，不然患者在治療前兩到三天需要停止所有的局部給藥。
7. 患者的皮膚在治療前必須要保持乾淨，治療區域請勿帶有任何乳液、化妝品、香水、粉末或/及沐浴油。請去除欲治療區域的毛髮。
8. 在療程中請勿使用任何乳液、凝膠或耦合介質。
9. 在有牙冠、牙套或有其它金屬植入物的區域可能會對治療較為敏感，醫師可以使用牙科用紗布捲、棉墊或者是壓舌板來隔離這些區域使治療更加舒適。

準備握把及探頭

1. 每次治療前，用不含酒精的醫用消毒劑清潔整個握把表面。在開始治療之前確保它是乾燥的。
2. 握把探頭僅供一次性使用。為每位患者和治療使用不同的探頭，並確保在治療前按照原廠使用手冊中的說明清潔探頭。

3. 檢查探頭電極針的完整性並確保它們都完好無損。如果任何針腳損壞或缺漏，請勿使用探頭。
4. 將探頭連接到握把的遠端端口並確保探頭固定到位。

一般治療資訊 (Diamondpolar 握把)

1. 建議的治療時間為 15 至 30 分鐘，取決於治療區域。
2. 可接受的結果可能需要在一段時間內進行6-10次治療，具體取決於治療區域和所執行的手術。
3. 在初始治療中，重要的是調整治療時間和所需的能量級別以達最適合患者對治療的耐受性。隨著患者對治療越來越熟悉，耐受性會增加。
4. 手術的目的是加熱治療區域的皮膚並將溫度至少提高到治療溫度（末端），並在剩餘的治療時間內保持該溫度。
5. 末端溫度應至少為39°C，但不應超過41°C。系統會在螢幕上顯示治療溫度。
6. 為獲得最佳臨床效果，建議保持患者可以耐受的最高溫度，但臉部溫度不超過41°C。
7. 在手術過程中，確保握把的電極輕輕按壓在患者皮膚上，並確保所有電極盡可能與皮膚接觸。
8. 握把的移動應長且連續，並以“8”字形、圓形、橢圓形或波浪形進行。握把必須始終處於運動狀態，同時與皮膚表面接觸。
9. 如果在末端處測得的皮膚表面溫度（如機器螢幕上所示）在臉部低於39°C，則治療不是最佳的，也不會達到預期的效果。
10. 達到的皮膚溫度取決於握把的移動速度和能量級別。能量越低，運動應該越慢（以允許熱量累積），反之亦然。
11. 如果患者在治療過程中感到不適或疼痛，可降低能量百分比、或使用更多的 Venus Concept Ltd. Glide、或進行更廣泛和更快的運動。如果仍然沒有幫助，請停止治療。
12. 一般情況下，每週進行1次治療，6到10次效果最佳。所需的實際療程數取決於患者的初始狀況及其依從性等。

測試治療 (Viva/Viva MD握把)

- 根據病情的嚴重程度、治療區域、骨骼接近度等建立並確認治療參數。如果在10-15分鐘內，末端沒有出現紅斑和水腫（呈探頭形狀），則增加電波能量級別並執行另一個測試點。如果反應過度，請減小參數並執行另一個測試點。
- 測試點結果代表患者是否可以耐受治療而不會產生副作用。根據患者對測試點的耐受性，可以確定治療參數以及是否需要麻醉。此外，建議在更改參數時執行測試點。

治療步驟 (Viva/Viva MD握把)

1. 剃掉治療區域的毛髮。
2. 用酒精棉片擦拭治療區域。在進行治療之前，該區域必須乾燥。
3. 確保在整個治療過程中皮膚完全乾燥。如果在治療過程中皮膚變濕（即出汗等），請用酒精棉片重新擦拭皮膚，並確保皮膚完全乾燥後

再繼續治療。

4. 根據測試點的結果設置治療參數。對於後續治療，根據所需的影響和先前的治療參數增加參數。
5. 選擇所需的探頭，並根據需要啟用重複模式。
6. 根據測試點反應調整治療參數。要進行治療，請將探頭放在治療區域，垂直於皮膚表面並與皮膚完全接觸。
7. 按下握把的扳機發射脈衝；這將在患者皮膚上印出一個探頭形狀，該形狀將在1-2分鐘後出現。將握把移動到皮膚上的相鄰點並發射另一個脈衝。脈衝之間應緊鄰不應有間隙。小心不要重疊治療的區域超過10%。
8. 檢查治療區域。達到預期效果的直接反應是探頭形狀的區域以及可能在其周圍產生紅斑和水腫。水腫通常在脈衝後1-2分鐘出現，並在30分鐘內達到高峰（至中度水腫）。應注意的是，在較深的皮膚類型中，紅斑不容易被注意到。因此，這些患者的水腫會更加突出。
9. 治療區域完成後，如果出現明顯的未經處理的皮膚區塊，請按照以下程序重新處理這些區塊：
 - A. 用乾紗布擦拭未經處理的皮膚區塊。
 - B. 照常處理未經處理的皮膚區塊。
10. 在繼續使用所選參數對整個臉部子區域進行治療之前，應對參數進行微調。
11. 有關治療的所有訊息（治療區域、日期、設置和治療持續時間）都應記錄在患者圖表中。
12. 參數可以在後續治療期間根據醫生的判斷進行修改。

注意

- 根據原廠使用手冊的說明對探頭進行消毒時，系統必須處於待機狀態。
- 始終檢查探頭電極針的完整性。確保沒有缺少針腳。如果缺少任何針腳，請勿使用。
- 在治療前和設置或更改預設之前，始終執行測試點，並根據需要等待評估結果。
- 在靠近骨骼進行治療時使用較低的電波能量級別。
- 非乾燥皮膚可能會導致疼痛。確保治療期間皮膚完全乾燥。

治療參數 (Viva/Viva MD握把)

選擇正確的無線電波參數為治療成功的必要條件。

請從較低的能量級別開始，並觀察皮膚的反應後再增加能量。

當對組織施加能量時，可能會產生不同的反應：

- 當溫度的增加相對較低時，可能會活化皮膚細胞。
- 在溫度更進一步提升後，可能會導致細胞損傷(壞死/凝血)，再繼續提高溫度可能會導致消融(因蒸發導致組織移除)。

警告：當選擇治療參數時，需要考慮症狀的擴散程度、深度，以及位置，例如是否靠近骨頭。另外也須考慮患者的皮膚型態以及耐受程度。

治療後照護

Diamondpolar 握把

在治療後的當晚，患者必須避免接觸熱水。必須用溫熱水輕柔的清潔皮膚，並且使用合適的水性保濕劑。

治療部位術後有可能會有紅斑、水腫及些許的不適，也有可能會有紫斑的發生，但在數日後即會消失。

Viva/Viva MD握把

1. 治療後不一定要進行冷卻，尤其不適合用於當一般的皮膚反應發生時。如果在術後有不適，建議立即使用空氣冷卻治療部位。也可以使用冷敷。產生水泡或者是潰爛的皮膚可以使用專用的藥膏處理。
2. 在治療的24-72小時後可能會產生直徑約1mm的微小結痂，並且可能會持續數天。當結痂發癢的時候請勿碰觸或抓撓。請讓結痂自然脫落。
3. 產生水泡或者是潰爛的皮膚可以依照醫師的指示使用抗生素藥膏或者是治療燒傷用的藥膏治療。
4. 在術後的前兩天，必須小心照護治療的區域來避免受傷。請避免熱水澡、按摩等。請保持皮膚乾淨以避免感染或發炎。請避免使治療區域受到機械損害或熱損害。
5. 術後的照護，請依照醫師的指示使用保濕液或者是乳霜。
6. 從術後的24到48小時直到皮膚復原，在這至少一個月的時間內患者必須要使用高係數的防曬乳(至少30 SPF)，並保護治療區域不會照射到陽光。並不得使用任何的助曬方法(曝露於陽光、助曬床及人造的仿曬乳)。在術後進行曬黑可能會造成色素過度沉著。

保養

1. 所有外部組件，應每周清洗/擦拭一次以上
2. 擦拭表面前須關閉系統以確保安全
3. 每一次治療後使用 Germicide wipes 或其它替代方法清潔握把，並在治療前，確認握把為乾燥的狀態
4. 避免使用清潔劑或會毀損外部所料之溶劑，如：氨、丙酮、鹽酸、氯漂白劑等

握把的清潔

⚠ 請勿浸泡配件於任何液體中

- 使用酵素清潔劑 (如0.5%濃度的亞尼氏多重酵素殺菌清潔劑 (ANIOSYME DD1))沾濕軟布來清潔配件直到目測乾淨為止，酵素清潔劑使用請遵照製造商使用說明書所示
- 使用水沾濕軟布來去除殘留的酵素清潔劑

握把的消毒

- 使用殺菌劑塗抹於握把上至少一分鐘
- 用乾淨的抹布擦拭握把

- ⚠ 確認握把上的易燃物質已乾燥
- ⚠ 治療前，確認握把已消毒

清潔電極探頭(tip)

- 尖端浸泡在 Deconex 53 Plus(2% solution)一分鐘，並用軟的尼龍毛刷刷
- 尖端放入超音波清洗機以 Deconex 53 Plus(2% solution)溶液清洗 15 分鐘
- 確認電極探頭至少 50%高濃度浸泡在上述溶液中
- 用DDW(蒸餾水)沖洗電極探頭
- 請自然風乾探頭，並在治療前確定探頭是否為乾燥狀態
- 如果尖端探頭在治療過程中需被清洗，請先確定系統處於待機模式
- 完成後，確定系統啟動，並繼續治療

型號及規格

	規格
輸入電壓	100 - 240VAC, 300 VA, 50/60Hz.
射頻頻率	1MHz
保險絲	3.15A, 250V
尺寸(W x L x H)	380mm x 400mm x 280mm
重量	8 Kg
Viva applicator	
射頻輸出參數	up to 62mJ/pin
最大射頻輸出功率	62mJ/pin
程式射頻的能量	7.04-62mJ/pin
能量範圍	205-225Vrms (Impedance: 200 – 2,500 Ohms)
電極最大輸出電壓	280 VRMS (without load)
電極	雙極
治療探頭	160 pins(40pin x 4)
治療探頭尺寸	2.93 cm ²
Viva MD applicator	
最大射頻輸出功率	62mJ/pin
輸出電壓範圍	96-113Vrms
最大輸出電壓	280V
電極	雙極
治療探頭	160 pins(40 groups x 4 pins)
治療探頭尺寸	2.93 cm ²
Diamondpolar applicator	
射頻能量範圍	Up to 75 W
電極最大輸出電壓	115Vrms
電極	雙極
磁場頻率	15Hz
磁場	15 Gauss

環境要求

- 腐蝕性的物質可能會損壞電子零件。請確保環境內無腐蝕性的物質。
- 金屬粉塵可能會損壞電子設備。請確保環境中沒有金屬粉塵。
- 本產品須放置於室溫介於15°C到 30°C (59°F-86°F)的環境下且相對濕度為在35°C時需小於80%，海拔不得高於3000公尺。
- 本產品需儲存在室溫介於-20°C到55°C (-13°F to 131°F)、相對濕度在60°C時小於80%的條件下，並且海拔不得高於15000公尺。
- 本產品的運輸環境要求為溫度介於-20°C到55°C (-4°F to 131°F)之間，相對濕度在60°C時小於80%的條件下，並且海拔不得高於15000公尺。

產品清單

- Venus Viva 系統主機
- Viva Applicator
- Viva MD Applicator
- Diamondpolar Applicator
- 電源線
- 原廠使用手冊
- Viva applicator Tips (Venus Viva 160-pin tips，5個1包)

製造業者名稱：Venus Concept Ltd.

製造業者地址：HaYozma street, bld. 6, Yokneam Illit, 2069203, Israel

醫療器材商名稱：科舉顧問股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載
(市售品須刊載實際地址)



Venus Viva 系統主機

Applicators pictures



Venus Viva 160-pin



Viva applicator



Viva MD applicator



Diamondpolar
applicator



電源線